

Particularité de l'appareil - ZOLL AED3 BLS

Facile à posséder, Facile à utiliser, Facile à entretenir


Dans seulement 50% de l'ensemble des réanimations la victime présente un rythme choquable.
Dans 100% des cas une réanimation cardio pulmonaire (RCP) est nécessaire!

Le *CPR-Feedback* aide à assurer une bonne profondeur des compressions thoraciques à une fréquence recommandée.

Les nouvelles recommandations AHA 2015 soulignent l'importance d'une RCR de haute qualité avant toute défibrillation.

*RCP = Compressions thoraciques / ventilation

Points Dominants

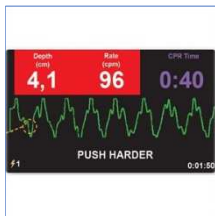


Dashboard RCP

Avec ECG du patient, fréquence de compression, profondeur, le nombre de choc, et le temps écoulé



Patch double-usage

Même paire d'électrode pour enfant et adulte, avec capteur RCP et kit d'urgence. Ce conserve 5 ans

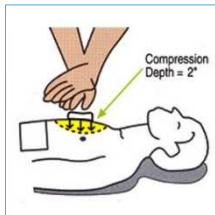

Seul DEA avec Capteur-RCP

Rétroaction visuelle et sonore accompagne les compressions thoraciques



Sacoche Ingénieux

Avec fenêtre et rabat




Décompte de la RCP

Compte à rebours visuel indiquant la fin d'un cycle RCP



Mode Enfant

Passage en mode-enfant en un clic

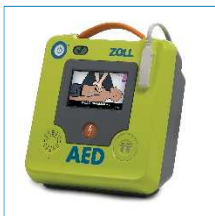


Visibilité Maximale

Position verticale et horizontale



Source d'Énergie

Batterie Lithium, durée de 5 ans

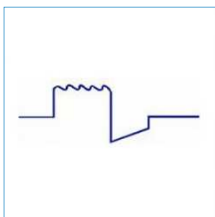

Puissant et Efficace

Signal Rectiligne Biphase, choc délivré 8 secondes après l'interruption de la RCP



Maintenance en Ligne

Test automatique hebdomadaire avec transmission de l'état de l'électrode et de la batterie par WiFi

Particularité de l'appareil - ZOLL AED3 BLS


Facile à posséder, Facile à utiliser, Facile à entretenir



Indicateur d'Etat
Indicateur d'état visuel et un signal sonore en cas de dysfonctionnement

Five Year Comparison						
Year	ZOLL AED3 BLS	Philips HeartStart FRx	Philips HeartStart FRx2	Philips HeartStart FRx3	Philips HeartStart FRx3L	Philips HeartStart FRx3L2
1	100	100	100	100	100	100
2	0	100	100	100	100	100
3	0	100	100	100	100	100
4	0	100	100	100	100	100
5	0	100	100	100	100	100
Total	100	400	400	400	400	400

Le Plus Facile à Entretenir
Voir notre document sur les couts d'entretien

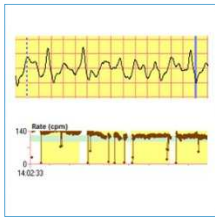

Mémoire Intégrée
1 à 2 événements cliniques d'un total de 120 minutes. ECG, mesures d'impédance, données CPR



Connecteur-USB Intégré
Pour les mises à jour logicielles et le transfert de données vers un PC



Evaluation
Transmission par WiFi, logiciel d'évaluation gratuit, documentation RCP inclus.



Robuste
Indice de protection contre la poussière et les jets d'eau (IP 55)
Teste de chute d'1m



Garantie Prolongée Gratuite
8ans au lieu de 6. Nous prenons soins de l'enregistrement en ligne



Compatibilité
Compatible avec les appareils chez REGA et de nombreux services d'urgence



En Option
Enregistreur vocal configurable



RapidShock analyse
Avec RapidShock la durée de charge / analyse est réduite à 4 secondes.